



STERLINK®

Modello STERLINK FPS-15s Plus

MODALITA' SACCHETTO (POUCH MODE)

- La prima sterilizzazione a sacchetto (Pouch mode) al mondo in 4 minuti con una tecnologia ad iniezione diretta brevettata



STERPACK®

Ciclo di sterilizzazione: Modalità Sacchetto (POUCH MODE)
Dimensioni: 135 mm x 280 mm
Sterilizzante: Perossido di Idrogeno 58%-59.5% (0.1cc/cell)
Tempo del processo di sterilizzazione: 4 min
Tempo minimo del ciclo: 7 min



STERPACK® PLUS +

Ciclo di sterilizzazione: Modalità Sacchetto (POUCH MODE) Plus
Dimensioni: 240mm x 410 mm
Sterilizzante: Perossido di Idrogeno 58%-59.5% (0.3cc/cell)
Tempo del processo di sterilizzazione: 8 min
Tempo minimo del ciclo: 14 min

MODALITA' CAMERA

- Camera rettangolare top-down per massimizzare l'efficienza del volume di sterilizzazione
- Ciclo di sterilizzazione a bassa temperatura User-friendly con i sacchetti convenzionali Tyvek
- Ciclo di sterilizzazione affidabile con il caricatore STERLOAD monouso



STERLOAD®

Ciclo di sterilizzazione: Modalità Camera
Dimensioni: 264mm x 410 mm x 125mm
Sterilizzante: Perossido di Idrogeno 58%-59.5% (0.9cc/cell)
Tempo del processo di sterilizzazione: 15 min
Tempo minimo del ciclo: 36 min



CONSUMABILI & ACCESSORI



STERPACK

Sacchetto impermeabile contenente sterilizzante per la modalità sacchetto



STERPACK PLUS

Sacchetto impermeabile contenente sterilizzante per la modalità sacchetto (POUCH MODE PLUS)



STERLOAD

Caricatore contenente sterilizzante per la modalità CAMERA



CARELLO

Carrello con blocco ruote



STAMPANTE

Stampante termica esterna



TYVEK POUCH (W330)

Dispositivo per imballaggio sterile per la modalità CAMERA



TYVEK POUCH (W200)

Dispositivo per imballaggio sterile per la modalità CAMERA



TYVEK POUCH (W100)

Dispositivo per imballaggio sterile per la modalità CAMERA



SIGILLATRICE

Sigillatrice rotante



CESTELLO

Cestello per sterilizzazione in modalità CAMERA



VASSOIO PLUS

Vassoio in alluminio STERPACK® PLUS per proteggere gli strumenti



VASSOIO

Vassoio in alluminio STERPACK® per proteggere gli strumenti



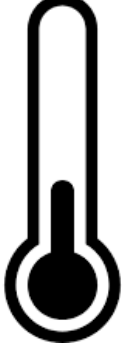
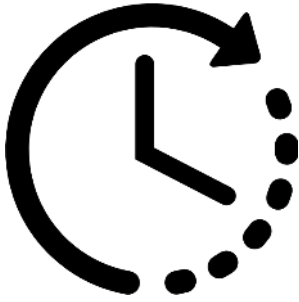
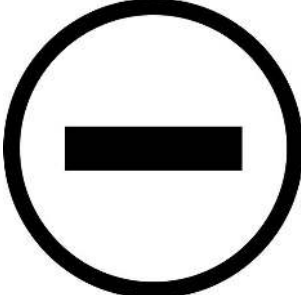
INDICATORE 1

Indicatori chimici per monitoraggio ciclo di sterilizzazione a nastro



INDICATORE 2

Indicatori chimici per monitoraggio ciclo di sterilizzazione a strisce

Temperatura operativa	Tempo del ciclo	Sterilizzante	Vantaggi	Svantaggi
				
Fino a 55° Bassa temperatura Sterilizzazione di dispositivi medici sensibili al calore	Diverse modalità di sterilizzazione: da 4 min (Sacchetto) a 15 min (Camera)	H2O2 Iniezione diretta (con plasma)	-Economico -Dimensioni ridotte -Design Ergonomico -Manutenzione semplice -Eco-friendly	Sterilizzazione dei tessuti non possibile

Specifiche tecniche STERLINK	
DIMENSIONI (LxPxA)	433mm x 614mm x 437mm
PESO	68 Kg
CAMERA DI STERILIZZAZIONE	264mm x 410mm x 125mm (14 Litri)
MODALITA' CICLO (Tempo minimo del ciclo)	STERPACK: 7min STERPACK PLUS: 14 min STERLOAD: 36 min
FUNZIONI OPZIONALI	Stampante esterna, ITS server
Specifiche tecniche STERLINK MINI	
DIMENSIONI (LxPxA)	470mm x 450mm x 330mm
PESO	18 Kg
CAMERA DI STERILIZZAZIONE	206mm x 346 mm x 137mm (7 Litri)
MODALITA' CICLO (Tempo minimo del ciclo)	STERPACK: 7min STERLOAD: 18 min
FUNZIONI OPZIONALI	Stampante esterna, ITS server
POMPA ESTERNA	18 Kg, tre diverse sistemazioni



STERILINK[®]

Modello STERLINK MINI